

技术参数

吻合器型号	臂杆长度	适用穿刺器
BQS45/60/45A/60A	190mm	12
BQM45/60/45A/60A	250mm	12
BQL45/60/45A/60A	350mm	12

吻合器型号	臂杆长度	适用穿刺器
BCS45/60/45A/60A	190mm	12
BCM45/60/45A/60A	250mm	12
BCL45/60/45A/60A	350mm	12

钉仓型号	钉仓颜色	钛钉高度	闭合钉高度	备注
BQJN45、BRJN45、BCJN45	灰 ●	2.0mm	0.75mm	
BQJW45、BRJW45、BCJW45	白 ○	2.5mm	1.0mm	
BQJB45、BRJB45、BCJB45	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	
BQJY45、BRJY45、BCJY45	金 ●	3.8mm	1.8mm	
BQJG45、BRJG45、BCJG45	绿 ●	4.1mm	2.0mm	
BQJH45、BRJH45、BCJH45	黑 ●	4.4mm	2.3mm	
BQJN45K、BRJN45K、BCJN45K	灰 ●	2.0mm	0.75mm	✂
BQJW45K、BRJW45K、BCJW45K	白 ○	2.5mm	1.0mm	✂
BQJB45K、BRJB45K、BCJB45K	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	✂
BQJY45K、BRJY45K、BCJY45K	金 ●	3.8mm	1.8mm	✂
BQJG45K、BRJG45K、BCJG45K	绿 ●	4.1mm	2.0mm	✂
BQJH45K、BRJH45K、BCJH45K	黑 ●	4.4mm	2.3mm	✂
BQJN60、BRJN60、BCJN60	灰 ●	2.0mm	0.75mm	
BQJW60、BRJW60、BCJW60	白 ○	2.5mm	1.0mm	
BQJB60、BRJB60、BCJB60	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	
BQJY60、BRJY60、BCJY60	金 ●	3.8mm	1.8mm	
BQJG60、BRJG60、BCJG60	绿 ●	4.1mm	2.0mm	
BQJH60、BRJH60、BCJH60	黑 ●	4.4mm	2.3mm	
BQJN60K、BRJN60K、BCJN60K	灰 ●	2.0mm	0.75mm	✂
BQJW60K、BRJW60K、BCJW60K	白 ○	2.5mm	1.0mm	✂
BQJB60K、BRJB60K、BCJB60K	蓝 ●	3.5mm	1.5mm	✂
BQJY60K、BRJY60K、BCJY60K	金 ●	3.8mm	1.8mm	✂
BQJG60K、BRJG60K、BCJG60K	绿 ●	4.1mm	2.0mm	✂
BQJH60K、BRJH60K、BCJH60K	黑 ●	4.4mm	2.3mm	✂

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.



地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号
电话：0519-8818 8331
网址：www.bnylkj.com
邮箱：bnylkj2018@163.com



- ☒ 安全
Safe
- ☒ 精准
Accurate
- ☒ 易操控
Manageable



一次性电动腔镜用
Disposable Powered Endoscopic
直线型切割吻合器及钉仓组件
Linear Cutter Stapler and Reload

一次性电动腔镜用
直线型切割吻合器及钉仓组件

(苏械注准20232011861)
Disposable Powered Endoscopic
Linear Cutter Stapler and Reload

适用范围：


适用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。



优势特点：


- ✓ 闭合型走刀槽的设计，更加坚固的系统。
- ✓ 电动和手动双重应急回刀，确保手术安全。
- ✓ 可选鹰钩嘴抵钉座款式，专为管状组织设计。
- ✓ “水滴形”钉槽设计，确保缝钉B字形成型效果，提高临床缝合成型效果。
- ✓ 360°旋转调节旋钮搭配左右45°摆动旋钮，更方便精准地到达目标部位。

✗ 传统开放型走刀槽

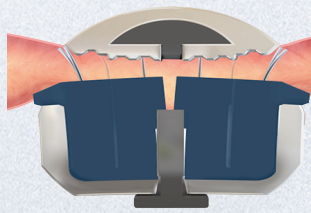

处理厚组织或张力大的组织时：
· 钉仓卡槽易变形；
· 钉腿弯曲：组织横向溢出较多，钉腿偏离钉贴凹槽

✓ 闭合型走刀槽

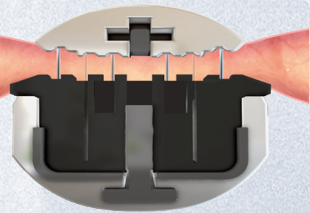

处理厚组织或张力大的组织时：
· 确保高负荷下钉仓卡槽不发生形变，影响缝钉成型。
· 钉仓卡槽近端和远端仍设有开口，方便医生观察刀片是否完全击发。