

操作简便 Easy to use

简单三步:放置牵开环-置入拉钩-固定拉钩, 即可实现术野的暴露。


Only three steps to setup: place the retractor ring at the right position-pull the tissue outwards by retractor's hooks-fix retractors on the ring.

自由牵开、显露 Flexibility in retraction and exposure

可根据手术需要, 自由选择所使用的拉钩数量, 拉钩放置的位置, 直至达到最佳的术野。

According to different surgery demands to select retractors and adjust their position to optimize the exposure of surgical field.

使用方法 Method of Application

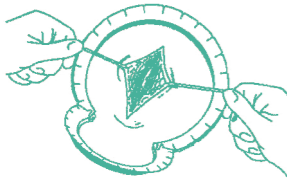

1.用于牵开伤口时: 在切口周围放置牵开环, 在组织中置入拉钩, 并将拉钩收紧到对应位置。

Place the retractor ring around the incision, Use the hook of the retractor to pull the tissue and then tighten the retractor to the appropriate position on the ring.



2.可根据需要重新定位拉钩, 或添加新的拉钩。

Reposition or add new retractors if needed.



3.辅助缝合时, 沿切口轴向放置并拉紧缝线, 以定位缝合口位置。

When using the device to assist suturing, position and tighten the retractor along the axis of the incision to fix the position of the incision.

邦尼外科医生好助手

帮你外科医生好助手

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.




地址: 江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号

电话: 0519-8818 8331

网址: www.bnylkj.com

邮箱: bnylkj2018@163.com

B&N®
邦尼医疗
Bonnie Medical

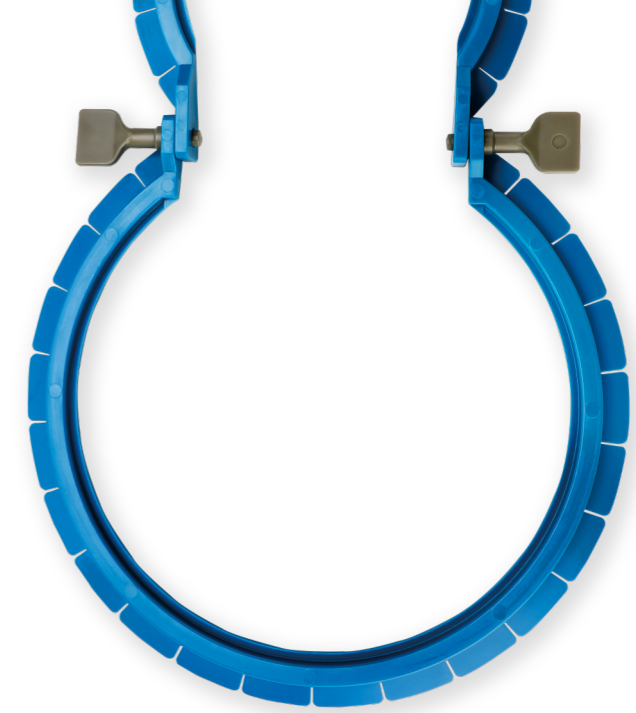

一次性使用

外科牵开固定器

Disposable Sterile Retractor System

- 自主保持
- 广泛应用
- 使外科手术更简单



邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.


一次性使用 外科牵开固定器

(苏械注准20222021446)

Disposable Sterile Retractor System

适用范围：一次性使用外科牵开器属于手动操作、自锁式手术器械，用于暂时性分离组织或其他解剖结构，暴露术中内部组织或器官，有钝形、锐形、开窗形等多种形式的拉钩。

The disposable surgery retractor system operates manually with self-locking function. The system applies to temporarily separate tissues or anatomical structures to increase exposure of internal tissues or organs in surgical field. The retractor equipped with various heads such as blunt, sharp fenestral, shape and so on.

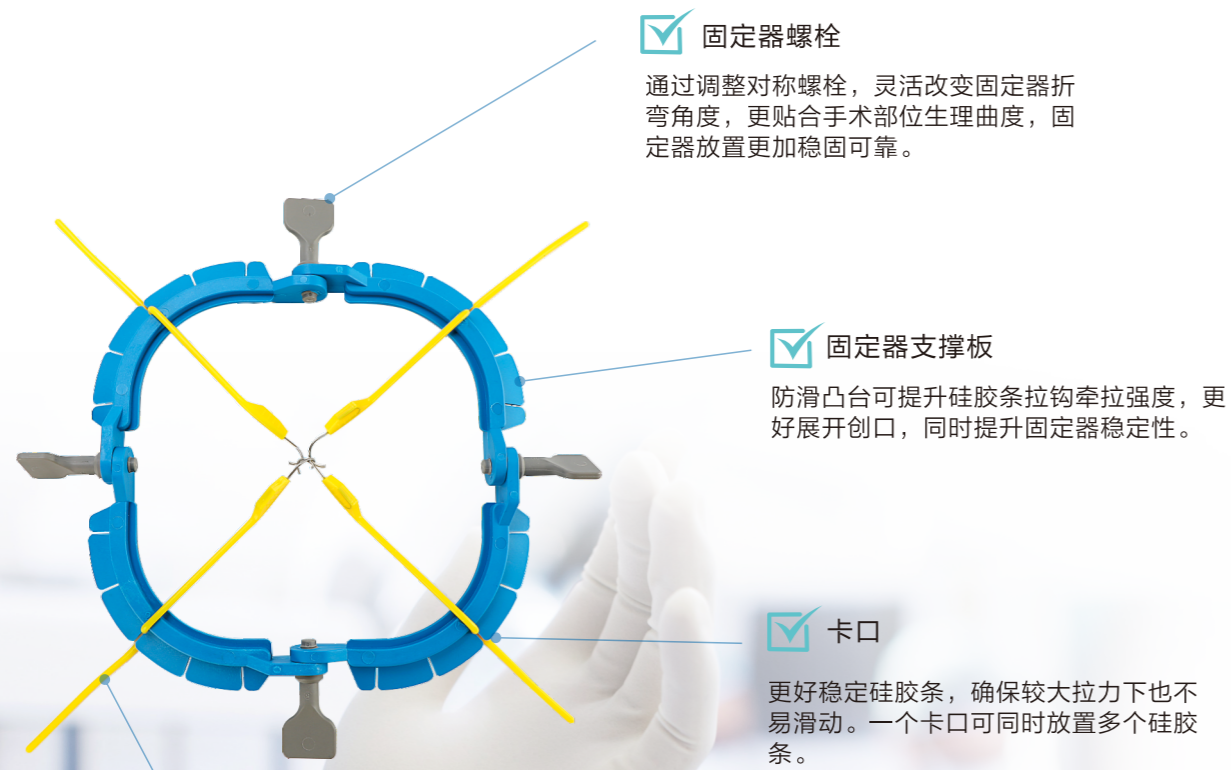

☑ 固定器螺栓

通过调整对称螺栓，灵活改变固定器折弯角度，更贴合手术部位生理曲度，固定器放置更加稳固可靠。

☑ 固定器支撑板

防滑凸台可提升硅胶条拉钩牵拉强度，更好展开创口，同时提升固定器稳定性。









☑ 卡口

更好稳定硅胶条，确保较大拉力下也不易滑动。一个卡口可同时放置多个硅胶条。

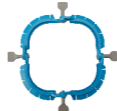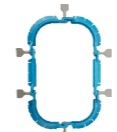





☑ 硅胶条拉钩

术中牵拉不滑脱、不断裂，可随时调整牵拉位置与角度，满足临床各种组织切口牵开需求。

技术参数

规格型号	适用科室及手术
BH-A 	头颈部、结直肠、普外科
BH-B 	头颈部、普外科
BH-C 	头颈部、妇科、泌尿外科
BH-D 	泌尿外科、妇科（窄骨盆及肥胖者）
BH-E 	妇科、普外科、泌尿外科
BH-F 	妇科、泌尿外科
BH-G 	头颈部、整形外科、儿童手术
BH-H 	妇科、整形外科手术

技术参数

适配拉钩型号	产品图片
BL-1 	
BL-2 	
BL-3 	
BL-4 